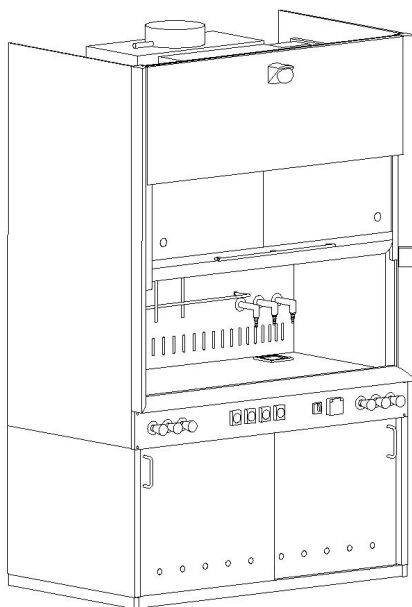


Zařízení a Izolátorová technologie - Digestoře

DIGESTOŘE DGLE - A

Digestoř je vybavena elektrickým výsuvem okna. Je hlídána opticko-akustickou signalizací polohy výsuvného okna. Digestoř se ovládá pomocí hlavního vypínače a pomocí dotykového barevného displeje, který je chemicky odolný. Digestoř je vybavena opticko-akustickou signalizací bezpečného odtahu, dále obsahuje alarm při poklesu bezpečného odtahu. Digestoř je osazena čidlem pohybu, které monitoruje prostor před digestoří. Digestoř má osazené zářivkové svítidla.

Laboratorní digestoř napojená na vzduchotechnický odtah zabraňuje úniku nebezpečných látek z pracovního prostoru digestoře do místnosti. Výpary z pracovního prostoru jsou účinně odsávány vzduchotechnickým odtahem napojeným na externí odtahový ventilátor nebo na centrální vzduchotechnické odtahové potrubí. Součástí digestoře není ventilátor. Digestoř je osazena čidlem pohybu, které monitoruje prostor před digestoří. Standardně je dodávána bez spodní části (podstavce), lze ji umístit na volně stojící stůl. K umístění digestoře lze použít kompatibilní spodní skříňku, kterou lze současně využít jako odsávanou skříň pro uložení chemikálií. Konstrukční řešení digestoře zajišťuje snadnou montáž i demontáž. Digestoř DGLE odpovídá evropské normě ČSN EN 14 175 - DIGESTOŘE.

Zařízení a Izolátorová technologie - Digestoře

DIGESTOŘE DGLE - A**S1: Typové označení**

550.30: digestoř DGLE

S2: Rozměrová řada

0900: digestoř o šířce 900mm

1200: digestoř o šířce 1200mm

1500: digestoř o šířce 1500mm

1800: digestoř o šířce 1800mm

2100: digestoř o šířce 2100mm

Výběr rozměrové řady digestoří

S3: Výška pracovní plochy

hodnota	výška
OT: jiná dle dohody s obchodníkem	mm
750: pro sedící obsluhu	750 mm
900: pro stojící obsluhu	900 mm
Výběr, zda-li je digestoř určená pro práci v sedě nebo ve stoje	

S4: Volba podstavce (kostry)

LS: kostra ocelová s povrchem z epoxidové vypalovací barvy RAL 7038

PB: podstava je z prodloužené bočnice - možnost doplnění uvedena v kategorii S5

WO: bez podstavce (zákazník si sám osadí digestoř)

Výběr způsobu usazení digestoře

Zařízení a Izolátorová technologie - Digestoře

DIGESTOŘE DGLE - A**S5: Volba skřínky pod digestoří**

hodnota	odtah skřínky
HPLA: z vysokotlakého laminátu s jednou policí, dvířka posuvná	Ano
HPLN: z vysokotlakého laminátu s jednou policí, dvířka posuvná	Ne
LKZLA: lamino s kombinovanými zásuvkami	Ano
LKZLN: lamino s kombinovanými zásuvkami	Ne
LKZPA: lamino s kombinovanými zásuvkami	Ano
LKZPN: lamino s kombinovanými zásuvkami	Ne
LNZA: lamino s nízkými zásuvkami	Ano
LNZN: lamino s nízkými zásuvkami	Ne
LVZA: lamino s vysokými zásuvkami	Ano
LVZN: lamino s vysokými zásuvkami	Ne
PKZLA: polypropylénová s kombinovanými zásuvkami	Ano
PKZLN: polypropylénová s kombinovanými zásuvkami	Ne
PKZPA: polypropylénová s kombinovanými zásuvkami	Ano
PKZPN: polypropylénová s kombinovanými zásuvkami	Ne
PNZA: polypropylénová s nízkými zásuvkami	Ano
PNZN: polypropylénová s nízkými zásuvkami	Ne
POA: polypropylénová s jednou policí, dvířka otočná	Ano
PON: polypropylénová s jednou policí, dvířka otočná	Ne
PPA: polypropylénová s jednou policí, dvířka posuvná	Ano
PPN: polypropylénová s jednou policí, dvířka posuvná	Ne
PVSA: polypropylénová s vysokými šuplíky	Ano
PVSN: polypropylénová s vysokými šuplíky	Ne
WO: prázdná hodnota	
WOA: bez vybavení	Ano
WON: bez vybavení	Ne

Výběr způsobu vyplnění prostoru pod digestoří, pokud je zvoleno v kategorii S3-900 a S4-PB. Bylo-li voleno v kategorii S3 a S4 jiné možnosti volí se varianta "WO"

S6: Volba pracovní desky

DL: velkoplošná keramická dlažba
DR: durcon - epoxidová pryskyřice
HPL: HPL (vysokotlaký laminát)
KE: celoplošná technická keramika
PP: polypropylén
SG: bezpečnostní sklo
UK: umělý kámen
304: nerezová ocel AISI 304
316: nerezová ocel AISI 316
Výběr materiálu pracovní desky

Zařízení a Izolátorová technologie - Digestoře

DIGESTOŘE DGLE - A**S7: Volba vyložení stěn a stropu**

DL: velkoplošná keramická dlažba (400x800)
DR: durcon - epoxidová pryskyřice
HPL: HPL - vysokotlaký laminát
KE: technická keramika
PP: polypropylén
SG: bezpečnostní sklo
WO: bez vylepení (jen příčky s povrchovou úpravou)
304: nerezová ocel AISI 304 FIN 8
316: nerezová ocel AISI 316 FIN 8
Výběr materiálu na stěnách a stropu digestoře

S8: Volba mediových ventilů

AC: acetylén
AR: argon
CDA: tlakový vzduch
CO2: oxid uhličitý
CW: voda pitná
DI: demi voda
HCW: voda teplá
HE: hélium
H2: vodík
NG: zemní plyn
N2: dusík
OT: jiné dle dohody s obchodním zástupcem
O2: kyslík
PB: propan-butan
VAC: vakuum
WO: pozice bez využití
Výběr media přiváděného do zadní části digestoře

S9: Volba materiálu úkapové výlevky pod kapalně medium

hodnota	rozměr
KECC: keramická	čtvercová 300 x 300 mm
KECD: keramická	čtvercová 400 x 400 mm
KECQ: keramická	čtvercová 150 x 150 mm
KEOB: keramická	obdelníková 300 x 150 mm
OT: jiné dle dohody s obchodníkem	
PPC: polypropylén	čtvercová 150 x 150 mm
PPO: polypropylén	obdelníková 300 x 150 mm
WO: bez výlevky	
Výběr, zda-li je požadována úkapová výlevka do pracovní desky pod kapalně medium	

Zařízení a Izolátorová technologie - Digestoře

DIGESTOŘE DGLE - A**S10: Volba umístění úkapové výlevky**

L: v levé straně

O: v levé i pravé straně

P: v pravé straně

Výběr pozice umístění úkapové výlevky

S11: Volba elektro zásuvek

L1: přípojka pro 1 LAN (ethernet)

L2: přípojka pro 2 LAN (ethernet)

S2: 2 zásuvky 1f/230V

S4: 4 zásuvky 1f/230V

S6: 6 zásuvek 1f/230V

S8: 8 zásuvek 1f/230V

V1: 1 zásuvka 3f/400V - 5 kolíků

V2: 2 zásuvky 3f/400V - 5 kolíků

Výběr počtu a typu zásuvek

S12: Volba vnitřní mříže

OT: jiné materiálové provedení nebo jiný počet svislic

WO: bez mříže

304: nerezová ocel AISI 304

316: nerezová ocel AISI 316

Výběr mříže