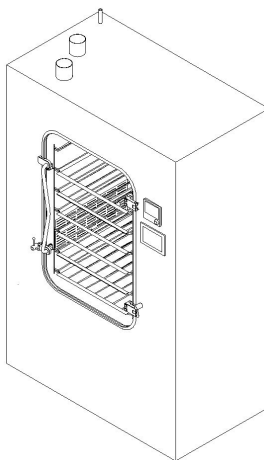


Оборудование и изоляторные технологии - Обеззараживающая передаточная кабина

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБИНА

Передаточная кабина обеззараживания чаще всего используется в качестве шлюза для материалов для перемещения материала между помещениями с различными классами чистоты (как правило, В и С). Прежде, чем поместить материал в помещение, он должен пройти обеззараживание (стерилизацию поверхности). Для обеззараживания приспособлений и материалов применяется процесс обеззараживания с помощью паров пероксида водорода. Генератор паров пероксида водорода является составной частью передаточной кабины, образуя единое оборудование. Это оборудование можно установить в стены, разделяющие помещения. Пары пероксида водорода при достаточной концентрации в замкнутом пространстве оказывают обеззараживающее и стерилизационное (на поверхности) действие. Преимущество данного типа обеззараживания состоит в том, что обеззараживание протекает при нормальной температуре (около 25 - 30 °C) и нормальном давлении, не

Оборудование и изоляторные технологии - Обеззараживающая передаточная кабина

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБИНА

оставляя при этом токсичных остатков, так как пероксид водорода после разлагается на кислород и воду. Для работы обеззараживающей передаточной кабины требуется сжатый воздух фармацевтического качества и подключение к существующим распределительным сетям ВЗТ, включая ветки для вентиляции паров пероксида водорода.

Преимущества кабина обеззараживания:

- низкие эксплуатационные расходы
- низкотемпературное обеззараживание
- короткое время цикла обеззараживания
- цикл обеззараживания можно валидировать и воспроизводить
- экологически чистое, побочные продукты только водяной пар и кислород
- возможность записи данных в запоминающее устройство, принтер или ПК
- длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании и ремонте
- выбор из нескольких типов и размеров
- удобство в обращении и эксплуатации

Оборудование и изоляторные технологии - Обеззараживающая передаточная кабина

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБИНА

S1: Типовое обозначение обеззараживающей передаточной кабины

560:00: типовое обозначение DPK

S2: Выбор линейки размеров

600x600x600: 600 x 600 x 600 mm (Ш x Г x В)

800x1200x800: 800 x 1200 x 800 mm (Ш x Г x В)

800x1800x800: 800 x 1800 x 800 mm (Ш x Г x В)

800x800x800: 800 x 800 x 800 mm (Ш x Г x В)

В данной категории выбирается внутренний размер кабины